

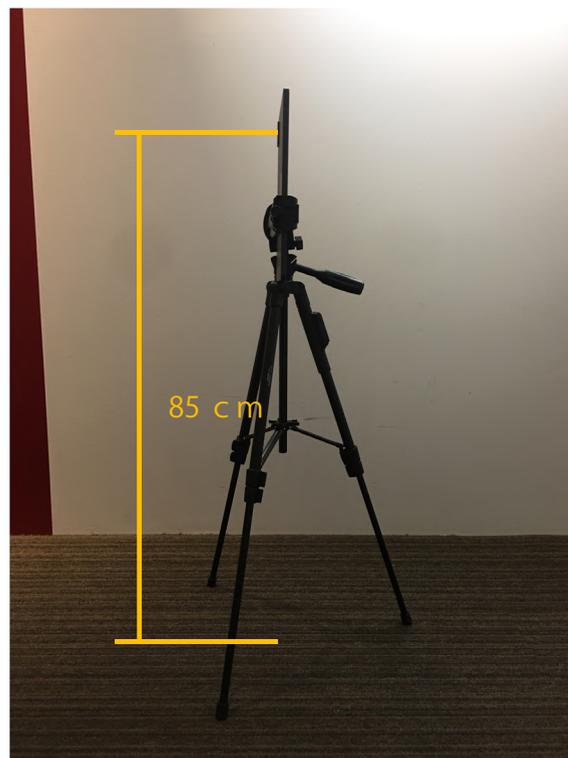


1. タブレットの設置方法

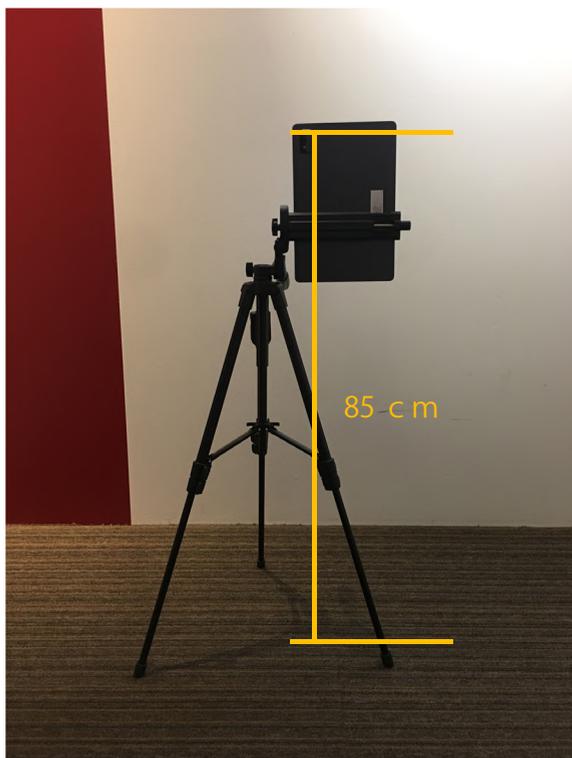


三脚にタブレットを装着し、タブレットのカメラの焦点が床面から85 c mの高さになるように三脚の高さを調整してください。

2. アプリ起動・システムログイン

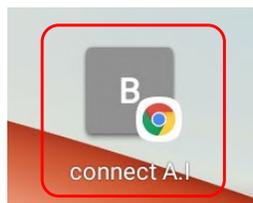


デスクトップ
「connect A.I.」をタップ

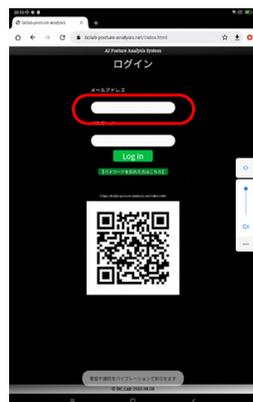

「メールアドレス」の窓をタップ



青色「続行」をタップ

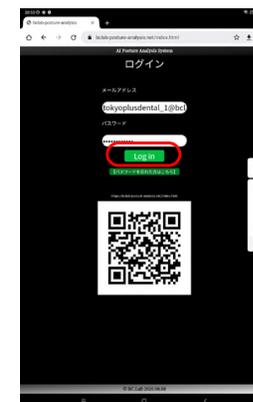

「Log in」をタップ



上記の画面が表示されれば「Log in」
完了です。


3. 設置状況の確認画面に進む




「撮影」をタップ



「新規登録」をタップ

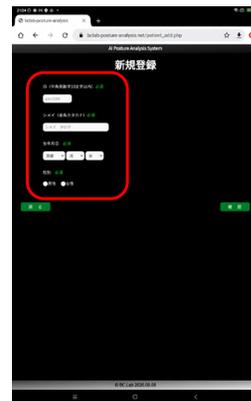

設置の際のみ使用するIDですので
適宜空欄を埋めて頂ければ結構です。

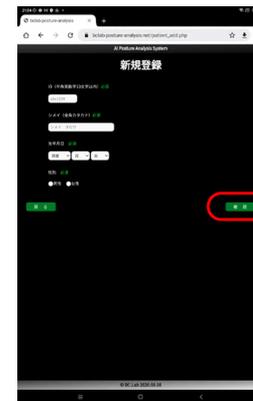

「登録」をタップ



登録情報を確認の上、
問題なければ
「登録」をタップしてください




「このまま、撮影開始する」
をタップ



「撮影開始」をタップ



「身長入力」をタップ

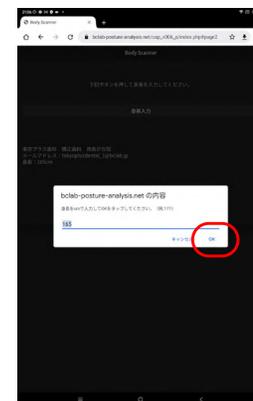

身長入力が済んだら
「ok」をタップ




ダイアログが出たら確認の上
「ok」で進んでください




「撮影」に進んでください。

4. 設置状況の確認

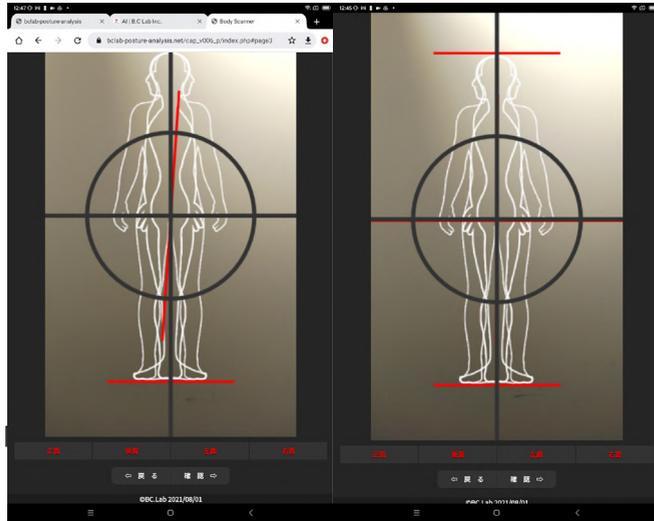

タブレットに映っているカメラ画像を確認しながら、「赤い十字」と「黒い十字」が重なるように、三脚の角度や向きを調整してください。

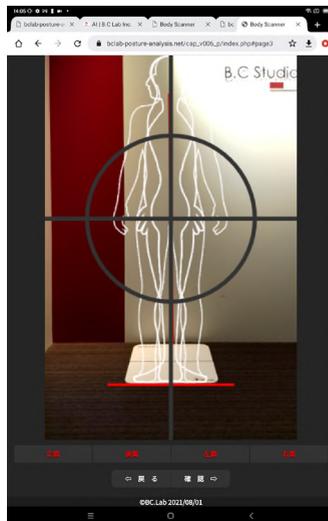

「赤い十字」と「黒い十字」が重なった状態で、「画面下部」の赤いラインと測定用マットの手前側が合うように、かつ、カメラの黒い縦ラインとマットの縦ラインがぴったり合うように、測定用マットを設置してください。

以上で、タブレットの設置は終了ですが、運用中に「マットが動いてしまった」「三脚を引っ掛けてしまった」等、設置環境の変化が認められる場合はカメラ画像を確認の上、設置状況を元の状態に戻すように心がけて下さい。